



Toiletsæde Dania med låg, 50 mm forhøjet
Med styrebuffer og specialbeslag tilpasset forhøjet sæde.

Varenummer

R33000
VVS: 615685000
NRF: 6190584
RSK: 7972415
EAN: 5708590070520
HMI: 1810
NBS: N13:300

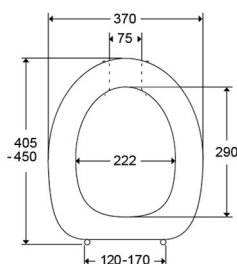
Toiletsæde Dania, 5 cm forhøjet, med låg. Med specialbeslag tilpasset forhøjet sæde. Sædet er forsynet med styrebuffer, som sikrer at sædet sidder mere stabilt - også ved sideværts belastninger. Materialer: Duroplast.

**Farve**

Hvid

Beskrivelse

Toiletsæde Dania, 5 cm forhøjet, med låg. Med specialbeslag tilpasset forhøjet sæde. Sædet er forsynet med styrebuffer, som sikrer at sædet sidder mere stabilt - også ved sideværts belastninger. Materialer: Duroplast.

**Materialer**

Sæde og låg: Hærdeplast (urea)

Hængsel: Rustfrit stål V2A

Toiletforhøjer: Nylon (PA)

Drejetapbuffer: ABS-plast

Produktkapacitet

Dette produkt er testet statisk med 225 kg. Da den europæiske hjælpemiddelstandard DS/EN 12182:2012 foreskriver test med sikkerhedsfaktor 1,5 er produktets nominelle maksimalbelastning derfor 150 kg.

Vægt

3,9 kg

Vægt emballeret

4,2 kg

Vægt pr. kolti

4,2 kg





**Toiletsæde Dania med låg, 50 mm forhøjet
Med styrebuffer og specialbeslag tilpasset forhøjet sæde.**

Antal pr. kolli	1
Kolli pr. palle	60
Antal pr. palle	60
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af toiletsædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Til desinficering af sædet kan f.eks. anvendes ethanol 85%. Det er vigtigt at sædet aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter desinficering, og at det herefter aftørres med en tør og blød klud. <i>Wc-rengøring og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rengøring er skyllet væk.</i>
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



www.pressalit.com
